



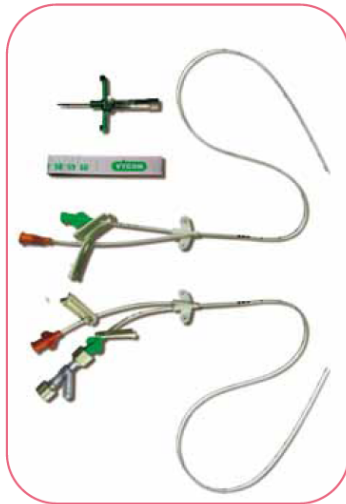

## Nutriline Twinflow 2 Fr

Nutriline Twinflow 2 Fr ha sido diseñado específicamente para bebés que requieren múltiples infusiones. El catéter es resistente y seguro por estar fabricado en poliuretano. El Nutriline Twinflow doble lumen mejora el manejo de las infusiones, preserva el capital venoso periférico y previene el trauma de las repetidas punciones. El Nutriline Twinflow puede suministrarse con mandril para facilitar su introducción.

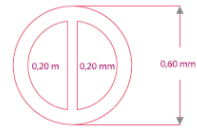

### Características y beneficios

- El doble lumen permite infundir, a la vez, drogas incompatibles.
- El catéter de una sola pieza facilita su introducción.
- Está diseñado para prevenir acodamientos.
- El PUR favorece la resistencia del catéter.
- La graduación centimétrica ayuda a una colocación más precisa.
- Prolongadores integrados con aletas permiten una fijación segura del catéter reduciendo además el riesgo de flebitis por movimientos durante la manipulación.
- Clamps para una mejor manipulación.
- La cinta métrica permite más precisión al colocar el catéter.
- No se mezclan las drogas dentro del catéter.
- Cánula pelable Microflash 20G que permite la fácil detección del reflujo de sangre.

Catéter (PUR)							
código	Ø Int. Ø Ext.	Fr	longitud (cm)	mandril	espacio muerto (ml)	flujo (ml/min) (presión:1 bar)	introduccion
1252.230	0.3 - 0.6	2	30	Si	2x0.2	2x1.45	microflash (20G)
1252.235				No			

Set de procedimiento con Nutriline Twinflow incluido (1235.235) ..... código 80197E03108

